

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S


Σποροκοκτόνο έτοιμο προς χρήση καθαριστικό και απολυμαντικό ταχείας δράσης με H₂O₂™

Η καινοτόμος σύνθεση του Incidin OxyFoam S & Incidin OxyWipe S παρέχει τα πλεονεκτήματα της πατενταρισμένης σύνθεσης υπεροξειδίου του υδρογόνου προσφέροντας αποτελεσματικότητα ευρέος φάσματος.

Είναι αποτελεσματικά έναντι ενός ευρέως φάσματος από βακτήρια και ιούς και δεν αφήνουν ενεργά υπολείμματα λόγω της ταχείας εξάτμισής τους.

Τα Incidin OxyFoam S & OxyWipe S παρέχουν:

- ▲ Ταχείας δράσης H₂O₂™
- ▲ Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 16615
- ▲ Το δραστικό συστατικό αποσυντίθεται σε νερό και οξυγόνο
- ▲ Σποροκτόνο και ιοκτόνο μαντηλάκι για όλες τις επιφάνειες
- ▲ Εξαιρετική συμβατότητα με τα υλικά

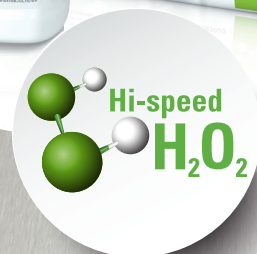

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S

Σποροκοκτόνο έτοιμο προς χρήση καθαριστικό και απολυμαντικό ταχείας δράσης με H₂O₂TM

3 MIN' Σποροκοκτόνο έναντι **C. difficile** (ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ)

2 MIN' Ιοκτόνο (ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ)

1 MIN' Βακτηριοκτόνο (EN 13727 / 16615)

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ	Αποτελεσματικότητα ευρέως φάσματος Σύντομος χρόνος δράσης
ΑΣΦΑΛΕΣ	Το δραστικό συστατικό αποσυντίθεται σε νερό και οξυγόνο. Άριστη συμβατότητα με τα υλικά
ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ	Καθαρίζει και απολυμαίνει με μια κίνηση Έτοιμα προς χρήση προϊόντα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΙΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΔΙΑΛΥΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	OxyFoam S ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ	OxyWipe S ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Απολύμανση των επιφανειών σύμφωνα με τη μέθοδο VAH 2015 (συμπ. του EN 16615), σε ρυπαρές συνθήκες		
Βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο	5 min	15 min
Μυκητοκτόνο	5 min	30 min
Μυκοβακτηριοκτόνο	15 min	30 min
Δοκιμή σύμφωνα με τις συστάσεις του RKI 01/2004		
Αποτελεσματικότητα έναντι ιών με περιβλήμα σύμφωνα με τις συστάσεις του RKI 01/2004	15 sec	30 sec
Adeno*	30 sec	1 min
Polyoma SV40*	30 sec	30 sec
Ευρωπαϊκά Πρότυπα (καθαρές & ρυπαρές συνθήκες)		
EN 13727 (βακτηριοκτόνο)	1 min	2 min
EN 13624 (ζυμοκτόνο)	1 min	15 min
EN 13624 (μυκητοκτόνο)	5 min	30 min
EN 14348 (φυματιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο)	5 min	30 min
EN 14476 (ιοκτόνο)	2 min** / 30 min	30 min**
EN 14476 Adeno	30 sec	30 sec
EN 14476 Nogo	1 min (καθαρές συνθήκες) 15 min (ρυπαρές συνθήκες)	15 min
EN 13704 (σποροκτόνο)**	30 min	60 min
EN 13704 (C. difficile)**	3 min	15 min
Euro-Norms (ρυπαρές συνθήκες) – 4-field-test		
EN 16615 (βακτηριοκτόνο)	1 min	2 min
EN 16615 (ζυμοκτόνο)	1 min	1 min
EN 16615 (μυκητοκτόνο)	5 min	5 min
EN 16615 (φυματιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο)	5 min	5 min
Sporicidal (μέθοδος EN 16615)**	15 min	30 min
C. difficile (μέθοδος EN 16615)**	5 min	5 min

INCIDIN OXYFOAM S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



- Ψεκάστε την επιφάνεια από περίπου 30 cm
- Σκουπίστε την επιφάνεια εξασφαλίζοντας ότι είναι εντελώς υγρή
- Αφήστε να στεγνώσει



- Ψεκάστε σε ένα καθαρό πανί
- Σκουπίστε την επιφάνεια εξασφαλίζοντας ότι είναι εντελώς υγρή
- Αφήστε να στεγνώσει

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΡΑ:
ECOLAB EUROPE GMBH
 Richtstrasse 7
 8304 Wallisellen
 Ελβετία
 +41 (0) 44 877 2001
 www.ecolab.com

ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH
 Ecolab-Allee 1
 40789 Monheim am Rhein
 Γερμανία
 +49 (0) 2173 599 0
 www.de.ecolab.eu



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ. ΑΣΦΑΛΕΣ. ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Incidin OxyFoam S: Απορρυπαντικός και απολυμαντικός αφρός ιατρικών επιφανειών (συμπ. ιατροτεχνολογικών συσκευών όπως π.χ. κεφαλών υπερήχων) και εξοπλισμού.



Incidin OxyWipe S: Μαντηλάκια καθαρισμού και απολύμανσης για ιατρικές επιφάνειες (συμπ. ιατροτεχνολογικών συσκευών όπως π.χ. κεφαλών υπερήχων) και εξοπλισμού.



© BIOZID N-12164

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Incidin OxyFoam S: Ψεκάστε την επιφάνεια από απόσταση περίπου 30 εκ. ή εφαρμόστε σε ένα καθαρό πανί. Σκουπίστε την επιφάνεια, εξασφαλίζοντας ότι αυτή παραμένει υγρή για τον απαιτούμενο χρόνο επαφής ή χρησιμοποιήστε το προϊόν μη αραιωμένο σε καθαρό πανί. Σκουπίστε την επιφάνεια και αφήστε να στεγνώσει.

Incidin OxyWipe S: Πάρτε ένα μαντήλι. Διαβρέξτε την επιφάνεια πλήρως.

Αφήστε να στεγνώσει και μην ξεπλένετε. Εξασφαλίστε την επαφή με ολόκληρη την επιφάνεια. Κλείστε το καπάκι μετά τη χρήση. Όχι για την απολύμανση επεμβατικών ιατρικών συσκευών. Μην χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες σε οξειδωτικούς παράγοντες όπως μάρμαρο, χαλκό ή ορείχαλκο.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

100γρ. περιέχουν τα κάτωθι δραστικά συστατικά:

Incidin OxyFoam S: 1.5 γρ. Υπεροξειδίου του υδρογόνου.

Incidin OxyWipe S: 1.5 γρ. Υπεροξειδίου του υδρογόνου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΧΑΡΤΟΥΣ-ΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Incidin OxyFoam S	6 x 750ml	3082060
Incidin OxyFoam S	2x5L	3087450
Incidin OxyWipe S	6 x 100	3082240

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία δοχείο κάτω από τους 25 ° C σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από άμεσο ηλιακό φως.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα: **Incidin OxyFoam S:** Στο τέλος της ημερομηνίας λήξης

Incidin OxyWipe S: Ένα μήνα

Βιβλιογραφικές αναφορές:
 1. Incidin OxyFoam S

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

